

RPW Shockwave Mobile



MOBILE RPW

La tecnología de ondas de presión radiales de Chattanooga ahora es móvil. Además de ser compacta, ligera y, por lo tanto, transportable, la unidad Mobile RPW ofrece una gran cantidad de características y ventajas.

PERFIL DEL USUARIO

Este equipo de ondas de presión radiales está óptimamente indicado para las siguientes aplicaciones:

- Ortopedia
- Reumatología
- Medicina física
- Fisioterapia
- Clubs deportivos
- Acupuntura
- Estética
- Veterinaria
- Pedicura y podología

INDICACIONES

- Dolor Miofascial
- Activación del tejido conectivo y muscular
- Patologías tendinosas y de inserción
- Acupuntura



El aplicador D-ACTOR del dispositivo Mobile RPW permite el uso rápido y eficaz de los transmisores del aplicador con el fin de obtener los efectos terapéuticos deseados durante el tratamiento.


Aplicador D-ACTOR®

Aplicaciones:

- Puntos gatillo miofasciales
- Otros trastornos de inserciones tendinosas
- Activación del tejido conectivo y muscular
- Terapia de ondas de choque en acupuntura
- Tratamiento celulítico (fases I – III)
- Tonificación del tejido conectivo y muscular
- Drenaje linfático
- Remodelación corporal
- Regulación del tono muscular
- Masaje terapéutico




Transmisores D-ACTOR®

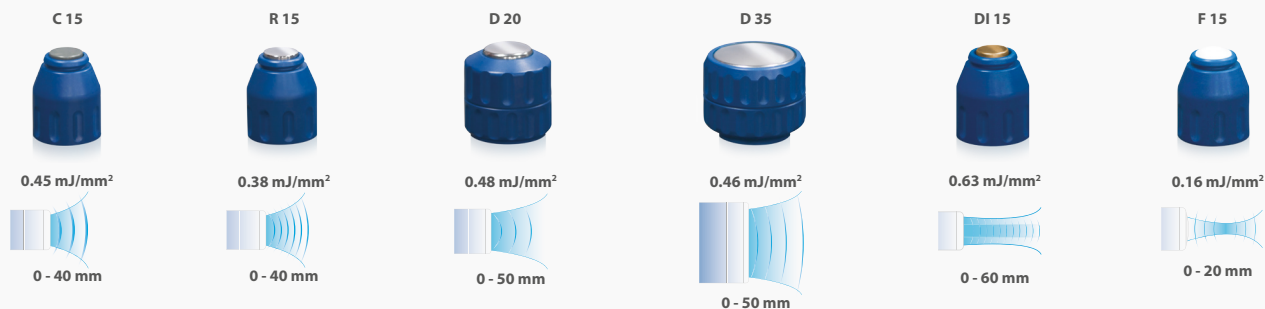



Puerto de acoplamiento de la pieza manual

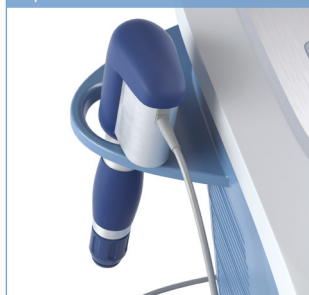

Soporte del gel para ecografía



La unidad Mobile RPW de Chattanooga es un dispositivo de ondas de presión radiales potente pero a la vez portátil que resulta ideal para las aplicaciones clínicas o deportivas. Gracias a su diseño compacto y ligero, junto con un compresor integrado silencioso, está perfectamente indicado para su uso portátil. La característica principal del diseño de la unidad Mobile RPW es su facilidad de uso. Gracias a la distribución ergonómica y simple de los controles es posible cambiar con facilidad los parámetros clave a la vez que la pantalla LED encendida indica con claridad la presión, la frecuencia y el número de pulsaciones. Las pulsaciones se inician mediante un mecanismo integrado en el aplicador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso de la unidad: aprox 9 kg
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 32 x 32 x 21 cm
- Compresor integrado
- Choques sencillos y continuos
Frecuencias D-actor: 1 - 15 Hz
Frecuencias V-Actor: 1 - 21 Hz
- Presión de aplicación: 1-4 Bar,
Totalmente variable con ajuste preciso de incrementos de 0.1
- Pieza de mano V- ACTOR opcional
- Conectividad USB



CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

- | | |
|---|--|
| 1 Indicación de la presión 1-4 bar | 4 Ajuste de la intensidad |
| 2 Indicación del número de disparos | 5 Reinicio del número de disparos a cero |
| 3 Pantalla de indicación de la frecuencia | 6 Ajuste de la frecuencia |

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:

2805 Unidad RPW Mobile

Accesorios estándar:

28699 - Aplicador de D-ACTOR®

17638 - Transmisor ESWT R15 de 15 mm

28724 - Transmisor D20-S D-ACTOR® de 20 mm

28701 - Kit de Accesorios que incluye los elementos siguientes:

- 28737 Conjunto de sellado
- 28738 Tubos guía (2 unidades)
- 28736 Proyectiles (2 unidades)

13-5182 - Gel de transmisión Conductor™, frasco de 250 ml (8,5 oz)

0938 - Guía Clínica

13-5184 - Manual del usuario de papel

13-5183 - Manual de usuario en CD

Accesorios opcionales:

28745 - Bolsa de transporte Mobile RPW

28725 - Transmisor D35 D-ACTOR® de 35 mm

28726 - Transmisor F15 con lente focal de 15 mm

28728 - Transmisor DI15 Deep Impact® de 15 mm

28729 - Transmisor C15 CERAmA-x® ESWT de 15 mm

28730 - V-ACTOR® pieza de mano

SPAIN:

DJO Ibérica

Carretera de Cornellà 144, 1ª 4ª

Esplugues de Llobregat

08950 Barcelona

SPAIN

Tel: +34 934 803 202

Fax: +34 934 733 667

Email: ventas@DJOglobal.com

LATIN AMERICA:

DJO Global, Inc

1430 Decision Street

Vista

CA 92081-8553

U.S.A.

Tel: 1 800 336 6569

Fax: 1 800 936 6569

Email: info.latam@DJOglobal.com



Together in Motion™